



# PROS

## Gebrauchsanweisung

### Massagepistole

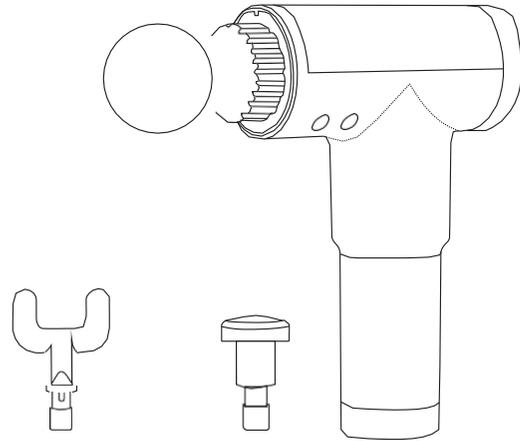

### Produktdetails

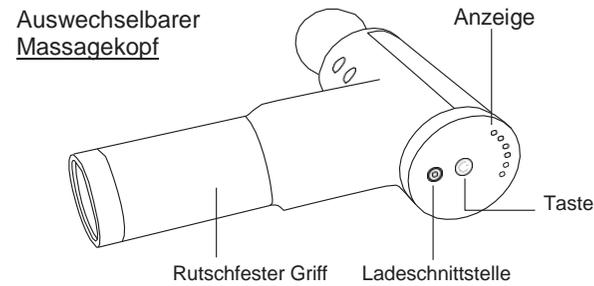

### TECHNISCHE DATEN

Produktname	Massagepistole
Nennspannung	8.4V/12V 1A
maximale Leistung	S 20W
Gewicht:	920 g
Gerätetyp	a

3. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeileuchte des Ladegeräts rot, und wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeileuchte gelb.



4. Ladezeit: ca. 3 Std. Nach dem Aufladen kann das Gerät 60-90 Minuten lang verwendet werden.

### Reinigung und Pflege

1. Darauf achten, dass kein Wasser oder aggressive Flüssigkeiten in den Gerätekörper gelangen, da dies zu Fehlfunktionen oder Schäden führen kann.
2. Mit einem neutralen Reinigungsmittel und einem weichen Tuch abwischen. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
3. Das eigenständige Öffnen des Gerätegehäuses ist nicht zulässig.

### Sicherheitshinweise

1. Die Verbindung vom Ladegerät zum Gerät trennen, wenn das Gerät gewartet oder transportiert wird.
2. Bei Fehlfunktion oder Ähnlichem (Brandgeruch) das Massagegerät sofort ausschalten.
3. Das Ladegerät nicht mit feuchten Händen trennen.
4. Nicht im Badezimmer oder an anderen feuchten

### ! Sicherheitshinweise

6. Keine beschädigten Ladegeräte verwenden. Wenn das Kabel oder der Stecker des Ladegeräts beschädigt ist, muss es durch ein Kabel oder Bauteile ersetzt werden, die über den Kundenservice des Herstellers bezogen werden können.
7. Den Ladestecker sauber halten.
8. Nicht lange der Sonneneinstrahlung aussetzen.
9. Produkte dürfen nicht verändert werden. Das Gerät darf nur von fachkundigem Personal gewartet bzw. repariert werden.
10. Kinder von dem Gerät fernhalten.



### ! Sicherheitshinweise

11. Das Ladegerät ausschalten, wenn das Gerät nicht benutzt wird oder Sie den Raum verlassen.
12. Das längere Laden oder der Betrieb des Gerätes darf nur unter Anwesenheit einer Person erfolgen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird oder Sie den Raum verlassen, bitte den Ladestecker aus der Steckdose ziehen.
13. Die Produkte nicht einatmen oder in entflammaren oder ölhaltigen Umgebungen verwenden.
14. Das Produkt nicht mit Wasser abspülen.



## 4 MASSAGEKÖPFE MIT 4 VERSCHIEDENEN FUNKTIONEN



Für große Muskelgruppen




Bei Wirbelsäulenbeschwerden

### Anwendungshinweise

Dieses Produkt wird über Tasten bedient.

1. Zum Einschalten des Gerätes den Touch-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt halten. Nach dem Einschalten läuft das Gerät in der voreingestellten 1. Geschwindigkeitsstufe. Das Display zeigt 01 an.
2. Zum Wechsel in die 2. Geschwindigkeitsstufe die Taste erneut drücken, im Display wird 02 angezeigt.
3. Zum Wechsel in die 3. Geschwindigkeitsstufe die Taste erneut drücken, im Display wird 03 angezeigt. Es können insgesamt 6 Stufen ausgewählt werden.
4. Zum Ausschalten des Gerätes die Taste während des Betriebs 3 Sekunden lang gedrückt halten, oder die Taste drücken, wenn die 6. Geschwindigkeitsstufe eingestellt ist.

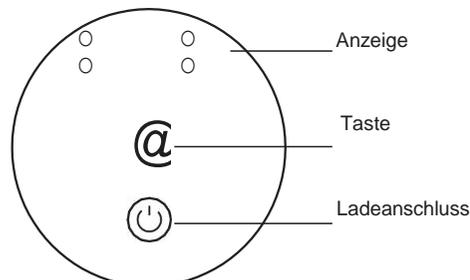


### Aufladen

Das Ladegerät ist im Gerät eingebaut.


1. Den Stecker des Ladegeräts mit der Steckdose verbinden.
2. Zum Aufladen die runde Schnittstelle des Ladegeräts mit der Ladeschnittstelle des Geräts verbinden.

### Massagekopf austauschen

1. Den Original-Massagekopf abziehen

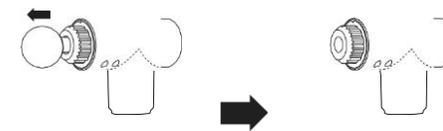

2. Den gewünschten Massagekopf aufsetzen.

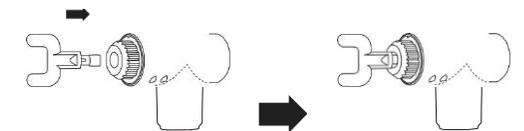

Bei Gelenkbeschwerden

Für alle Körperteile



## FÜR IHRE GESUNDHEIT

Das pulsierende Massagegerät kann Geist und Seele beleben und für einen gesünderen und wohlgeformteren Körper sorgen. Es hilft auch bei schmerzenden, empfindlichen Muskeln und Gelenken.