

 **powerhands**  
by **POWERFIT**



# Benutzerhandbuch

Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.



# Einführung

Vielen Dank, dass Sie Powerhands verwenden. Genießen Sie jederzeit und überall eine angenehme Handmassage.

Um dieses Produkt ordnungsgemäß zu verwenden und zu warten, lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

## Inhaltsverzeichnis

Einführung .....	3
Sicherheitsinformation .....	4
Hochladen .....	4
Bedienfeld .....	5
Funktionen des Bedienfelds .....	5
Das Problem lösen .....	7
Technische Information .....	7

## Sicherheitsinformation

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Dieses Produkt eignet sich für Menschen, die lange am Computer arbeiten, mit Mobiltelefonen spielen, unter Taubheitsgefühlen in den Fingern leiden und eine entspannende Massage ihrer Hände wünschen.

Dieses Produkt muss über USB mit einem Mobiltelefonladegerät aufgeladen werden. Bitte beachten Sie, dass nur Ladegeräte mit einer Ausgangsspannung von 5V 1Amp - 5V 4Amp verwendet werden können und Ladegeräte mit einer Ausgangsspannung von mehr als 6V nicht verwendet werden können. Die rote Farbanzeige blinkt während des Ladevorgangs und die Anzeige wird grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Schalten Sie das Gerät aus, um den Druck im Inneren abzubauen, bevor Sie Ihre Hand entfernen.


## Hochladen

Wenn der Powerhands-Akku leer ist, dauert es fast 4 Stunden, ihn vollständig aufzuladen. Verwenden Sie das USB-Kabel, das mit einem Ladegerät geliefert wurde (nicht im Lieferumfang enthalten).

Das Laden der Powerhands über den Computer wird nicht unterstützt.

Sobald die Powerhands vollständig aufgeladen sind und Vibration und Heizung eingeschaltet sind, können sie bis zu 100 Minuten lang laufen.

# Bedienfeld

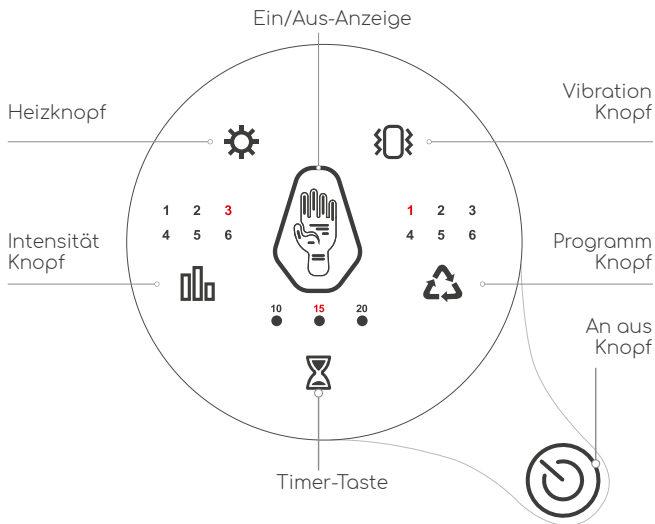

## Funktionen des Bedienfelds

- Ⓜ **Ein / Aus Schalter:** Powerhands ein- oder ausschalten. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Es beginnt mit dem Standardeinstellungsmodus zu arbeiten: P1-Modus, Intensitätsstufe 3 und Timer in 15 Minuten. Drücken Sie erneut 2 Sekunden lang, um es auszuschalten.
- ⚙ **Heizknopf:** Drücken Sie diese Taste, um die Heizfunktion ein-/auszuschalten. Das Symbol wechselt zu Rot, es würde bis zu 5 Minuten dauern, bis die maximale Temperatur erreicht ist.



## Batteriestandsanzeige

100 - 51%



50 - 21%



20 - 1%



Wenn die geschätzte verbleibende Akkuladung auf etwa 1% sinkt, piept das Gerät 4 Sekunden lang und schaltet sich dann nach 1 Minute ab.



**Intensitätsknopf:** Der Standardwert ist L3 mit insgesamt 6 Intensitätsstufen. Sie können es aus L3-L4-L5-L6-L1-L2 in der Reihenfolge auswählen, in der L1 am schwächsten und L6 am stärksten ist.



**Timer-Taste:** Die Standardstartzeit beträgt 15 Minuten. Drücken Sie das Sanduhrsymbol, um zwischen 10 Minuten, 15 Minuten oder 20 Minuten zu wechseln, es kann frei eingestellt werden.



**Vibrationstaste:** Drücken Sie, um die Vibration zu aktivieren/-deaktivieren. Es gibt 2 Vibrationsmodi:

- **Pulstyp** (Das Symbol wechselt in die blaue Farbe)
- **Kontinuierliche Vibration** (Symbol wechselt zu rot), können Sie die Vibration durch Berühren des Symbols auswählen.



**Programmtaste:** Das Standardprogramm ist P1, insgesamt stehen 6 Programme zur Verfügung. Sie können Ihr Lieblingsprogramm für die Massage in der Reihenfolge P1-P2-P3-P4-P5-P6-P1 auswählen.

### Programm Beschreibung:

**P1:** Kombination von P2 bis P6. Die Abschlusszeit jedes Modus beträgt 20 Sekunden.

**P2:** Handfläche + Handgelenk zufällig

**P3:** Handfläche + Handgelenk gleichzeitig

**P4:** Handgelenk

**P5:** Abwechselnd Handfläche + Handgelenk

**P6:** Palme

Powerhands verfügt über eine Speicherfunktion, die die Einstellung der letzten Verwendung speichert.

## Das Problem lösen

Fehlertyp:	Ursache	Lösung
Produkt kann nicht gestartet werden	Die Batterie ist leer	Hochladen
	Der Intensitätsmodus ist nicht aktiviert	Aktivieren Sie den Intensitätsmodus
Seltsames Geräusch im Betrieb	Pumpendes Luftgeräusch (Brummen)	Maschine läuft normal, kein Problem
	Geräusch des Magnetventils (Tick-Tack)	

## Technische Information

Produktname	Powerhands
Modellname	R-H001
Spannung	DC 5V
Aktuell	5W
Hochladen	USB-Typ-C-Schnittstelle 5V
Batteriekapazität	3,6 V, 2500 mAh Lithiumbatterie
Empfohlene Zeit	15 Minuten
Heizfunktion:	Bis zu 43 °C
Gewicht	990 Gramm

## Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantie gegen Herstellungsfehler, vorbehaltlich der Fristen, die in den geltenden Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes festgelegt sind. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch, fahrlässige kommerzielle Nutzung, ungewöhnliche Abnutzung, Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen Therapie.



## Enthaltene Artikel:

- 1 Powerhands-Massagegerät
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 USB-C-Kabel
- 1 Reisetasche
- 1 Fingermassagegerät



Made in China. ©2022. All rights reserved.

### DISTRIBUTED BY:

Orange Planet  
De Els 3a  
5107 RK Dongen  
The Netherlands



Download the manual  
in different languages here  
[www.yellowweb.nl/manuals-powerhands](http://www.yellowweb.nl/manuals-powerhands)



**LE TRI**  
**+ FACILE**

EMBALLAGES A SEPARER  
ET A DEPOSER DANS LE  
BAC DE TRI



*Séparez les éléments avant de trier*